



**INDUSTRIE
& MÉDICAL**

PROTECTION DES MAINS

SOLUTIONS DE
CONTRÔLE
DES CONTAMINATIONS
ET DE **PRÉVENTION**
DES RISQUES



CATALOGUE

WWW.MEDICOM-EU.COM

02

PROTECTION DES MAINS

Domaines d'application	32
------------------------	----

Règlementation	33
----------------	----

Guide des tailles	37
-------------------	----

Notre gamme	38
-------------	----



GANTS

DOMAINES D'APPLICATION



DISPOSITIF MÉDICAL (DM)

Fait barrière à la contamination

NORMES EUROPÉENNES
EN 455 ET EN ISO 10993



ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

Protège l'utilisateur contre un risque extérieur

NORMES EUROPÉENNES
EN ISO 21420, ISO EN 374-1/2/4/5, EN 16523-1,
ISO 16604, EN 421, ASTM D6978-05



ÉQUIPEMENT D'HYGIÈNE

Protège l'environnement

CONFORME AUX EXIGENCES
DU RÈGLEMENT (CE) 1935/2004 (contact alimentaire)

RÈGLEMENT (UE) 2017/745

RELATIF AUX DISPOSITIFS MÉDICAUX

NORMES EUROPÉENNES EN 455

GANTS MÉDICAUX À USAGE UNIQUE (DM)

Cette série de normes est applicable pour les gants médicaux ; ces gants ont pour objectif de faire barrière entre le patient et l'utilisateur contre toute contamination croisée.

La série de normes EN 455 comporte 4 parties :

EN 455-1:2020+A2:2024 EXIGENCES ET TESTS SUR LA DÉTECTION DES TROUS

Les gants doivent passer un test d'étanchéité à l'eau pour la détection de trous. Ce test est réalisé sur un échantillonnage statistique (prélevé conformément à ISO 2859-1).

EN 455-2:2024 EXIGENCES ET TESTS SUR LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Cette norme spécifie les exigences et les méthodes d'essai relatives aux propriétés physiques des gants médicaux, telles que les dimensions et la résistance à la rupture avant et après un vieillissement accéléré.

	GANTS D'EXAMEN/PROCÉDURE Latex / Nitrile	GANTS D'EXAMEN/PROCÉDURE Thermo-plastique polychlorure de vinyle, Polyéthylène
Résistance à la déchirure exprimée en Newtons (N)	≥ 6.0	≥ 3.6

EN 455-3:2023 EXIGENCES ET TESTS SUR L'ÉVALUATION BIOLOGIQUE

Cette norme décrit des exigences et des méthodes d'essai permettant d'évaluer la sécurité biologique des gants médicaux.

Il s'agit d'évaluer les facteurs tels que :

1. La teneur en endotoxine (pour les gants stériles uniquement)
2. La quantité de poudre
3. Les composés chimiques utilisés dans les processus de fabrication - accélérateurs, antioxydants, biocides
4. Les protéines extractibles (pour les gants latex)
5. La biocompatibilité (selon les normes EN ISO 10993)

EN 455-4:2009 DÉTERMINATION DE LA DURÉE DE CONSERVATION

Cette norme sert à déterminer la date limite d'utilisation, date au-delà de laquelle le gant ne peut plus être utilisé en garantissant l'intégrité de ses propriétés. La durée de vie maximale d'un gant médical est de 5 ans à partir de la date de fabrication.

RÈGLEMENT (UE) 2016/425 RELATIF AUX ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

CATÉGORIES

- CATÉGORIE I** protège contre les risques mineurs
CATÉGORIE II protège contre les risques intermédiaires, certifié conforme par un organisme notifié.
CATÉGORIE III protège contre les risques mortels (risques microbiologiques, chimiques...) certifié conforme et contrôlé annuellement par un organisme notifié

NORME EN ISO 21420:2020+A1:2024



Exigences générales et méthodes d'essai applicables à tous les gants de protection individuelle.

Elle reprend:

- ! L'ergonomie et la construction du gant
- ! La propriété électrostatique (optionnel)
- ! L'innocuité
- ! Le confort et l'efficacité
- ! Le marquage et les informations fournies par le fabricant

NORME EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES

Comment se détermine la résistance du gant au contact d'un produit chimique ?

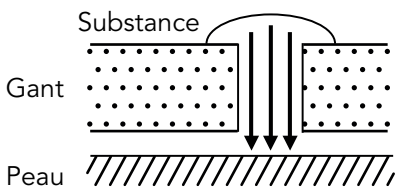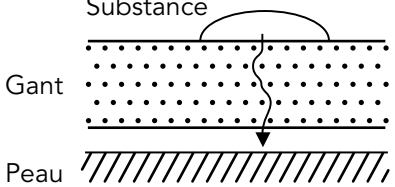PÉNÉTRATION	PERMÉATION	DÉGRADATION
La pénétration décrit le passage d'un produit chimique à travers les imperfections du matériau ou les porosités et les joints du gant*. 	La perméation est la diffusion, à l'échelle moléculaire, du produit chimique à travers le matériau constitutif du gant*. 	La dégradation concerne la détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques. Dégradation = transformation avec détérioration d'une ou de plusieurs propriétés du matériau du gant, suite au contact avec un produit chimique, par exemple écaillage, gonflement, désintégration, fragilisation, décoloration, variations dimensionnelles, durcissement, ramollissement, etc...

* Source: Institut National de Recherche et de Sécurité

La norme s'appuie sur 3 méthodes de test :

- ! Test de pénétration selon la norme EN ISO 374-2:2019
- ! Test de perméation selon la norme EN 16523-1:2015+A1:2018
- ! Test de dégradation selon la norme EN ISO 374-4:2019

Pour pouvoir revendiquer une protection contre un produit chimique, ces 3 essais doivent être réalisés. Les résultats sont reportés dans la notice d'information.

PERMÉATION CHIMIQUE: EN 16523-1:2015+A1:2018

Le risque de perméation chimique correspond au passage de la substance à travers le gant. La migration des molécules chimiques à travers le gant est déterminée par le temps de passage (en minute) de la substance chimique au travers du gant. Le choix du gant repose sur son niveau de performance (temps de passage) qui conclut à l'appartenance à un type de protection (A, B ou C).

1 seul pictogramme & 3 types de protection :

TYPE DE GANTS	EXIGENCE	EXEMPLE DE MARQUAGE
Type A	Temps de passage $\geq$ 30 min pour au moins 6 produits	
Type B	Temps de passage $\geq$ 30 min pour au moins 3 produits	
Type C	Temps de passage $\geq$ 10 min pour au moins 1 produit	

Liste officielle des produits chimiques inscrits pour la norme EN ISO 374-1:2016+A1:2018

A	Méthanol	67-56-1	Alcool primaire
B	Acétone	67-64-1	Cétone
C	Acétonitrile	75-05-8	Composé nitrile
D	Dichlorométhane	75-09-2	Hydrocarbure chloré
E	Bisulfure de carbone	75-15-0	Composé organique contenant du soufre
F	Toluène	108-88-3	Hydrocarbure aromatique
G	Diéthylamine	109-89-7	Amine
H	Tétrahydrofuranne	109-99-9	Composé étherique hétérocyclique
I	Acétate d'éthyle	141-78-6	Ester
J	n-Heptane	142-82-5	Hydrocarbure saturé
K	Hydroxyde de sodium 40%	1310-73-2	Base inorganique
L	Acide sulfurique 96%	7664-93-9	Acide minéral inorganique, oxidant
M	Acide nitrique 65%	7697-37-2	Acide minéral inorganique, oxidant
N	Acide acétique 99%	64-19-7	Acide organique
O	Ammoniaque 25%	1336-21-6	Base organique
P	Peroxyde d'hydrogène 30%	7722-84-1	Peroxide
S	Fluorure d'hydrogène 40%	7664-39-3	Acide minéral inorganique
T	Formaldéhyde 37%	50-00-0	Aldéhyde

**NORME EN ISO 374-5: 2016
PROTECTION CONTRE
LES MICRO-ORGANISMES**

Les gants doivent satisfaire
le test d'étanchéité selon la norme
EN ISO 374-2:2019.

La possibilité de revendiquer une protection
contre les virus est ajoutée si le gant passe le
test ISO 16604 : 2004 (méthode B).


	Pour les gants offrant une protection contre les bactéries et les champignons.
	Pour les gants offrant une protection contre les bactéries, les champignons et les virus.

AUTRES NORMES

	Pour les gants offrant une protection contre les particules radioactives
	Pour les gants offrant une protection contre les produits cytotoxiques (médicaments de chimiothérapie).

**SYMBOLES
/ LÉGENDE**

	Non poudré
	Poudré
	Contact alimentaire

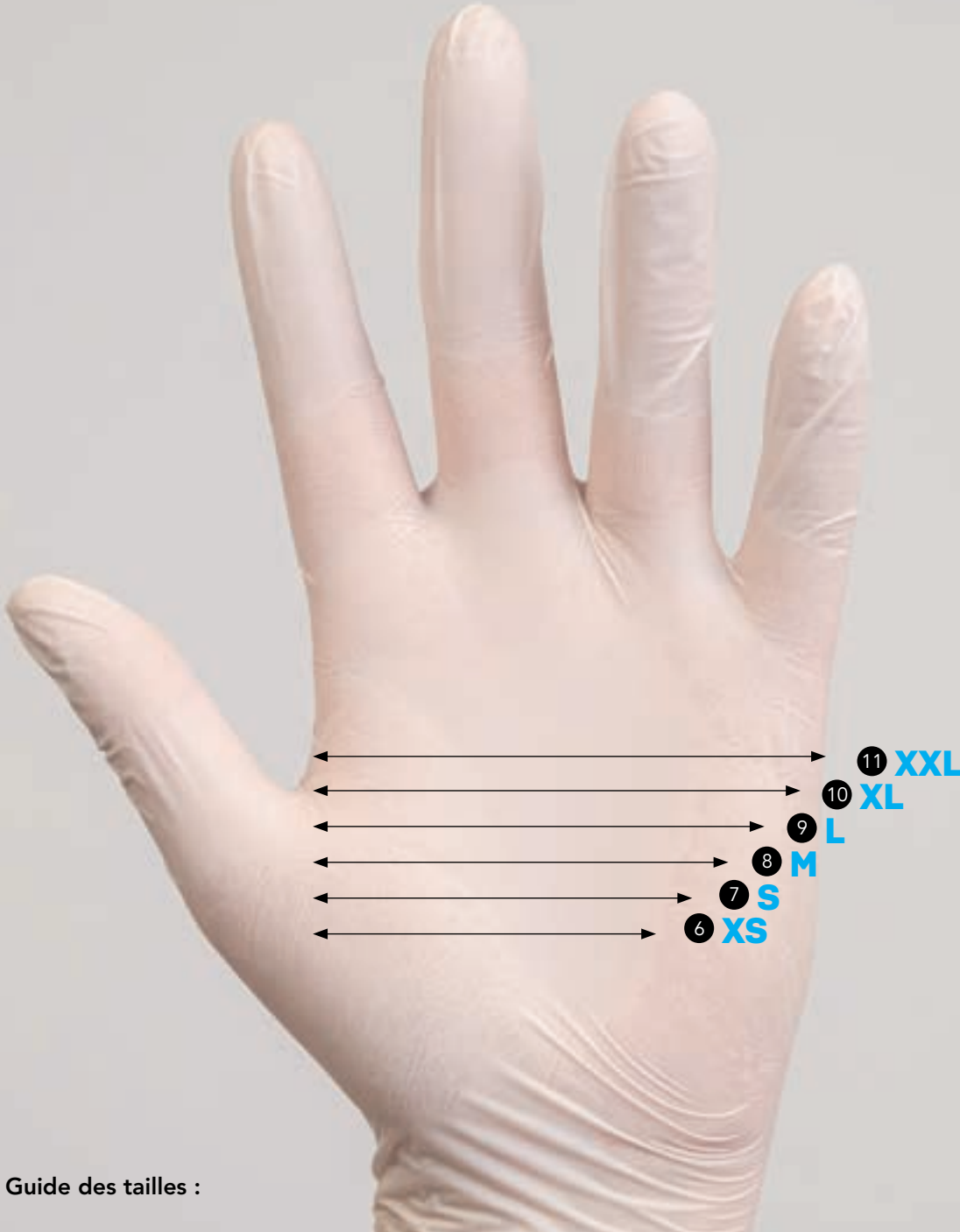

Guide des tailles :

TAILLE		Circonférence de la main (en mm)	Longueur de la main (en mm)	Longueur minimale du gant (en mm)
T6	XS	152	160	240
T7	S	178	171	240
T8	M	203	182	240
T9	L	229	192	240
T10	XL	254	204	240
T11	XXL	279	215	240



NOTRE GAMME & APPLICATIONS POSSIBLES

Nous proposons une large gamme de gants en nitrile, latex, vinyle mais aussi des gants en polyéthylène. Disponibles dans différentes tailles, du XS au XXL, ils sont proposés pour la plupart en carton de 10 boîtes de 100 gants.

Fabriqués dans le respect des normes en vigueur, DM et/ou EPI et/ou contact alimentaire, ils sont adaptés pour une utilisation dans l'agro-alimentaire, le médical ou l'industrie.



NITRILE

CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE

Idéal pour les utilisateurs sensibles et allergiques au latex naturel.

PROTECTION

Élevée contre les perforations, les produits chimiques et les contaminations.

DEXTÉRITÉ

Grande élasticité, ajustement optimal et bouts des doigts texturés, pour une manipulation précise.

CONFORT

Sensibilité tactile quasi identique au latex et confort optimal lors d'une utilisation prolongée.

RÉSISTANCE

Robuste, excellente longévité (haute résistance 3 fois supérieur au latex).

NOTRE OFFRE MEDICOM

- Coverfeel Touch ■ ■ ■
- Coverfeel Care ■ ■ ■
- Coverfeel Care Long ■ ■ ■
- Safetouch Long
- Safetouch Heavy
- Safetouch Platinum
- Safetouch Slim
- Safetouch Vitals
- Safetouch Black Lite
- Safetouch X'Tra
- Herkul Strong
- Herkul Extra Strong



LATEX

PROTECTION

Fournit une protection efficace contre les contaminants biologiques.

DEXTÉRITÉ

Excellente sensibilité tactile, essentielle pour les tâches délicates.

CONFORT

Offre un ajustement, une élasticité et un confort remarquables, idéal pour une utilisation prolongée.


RÉSISTANCE

Bonne durabilité

NB : risques allergiques possibles en cas d'exposition prolongée et direct avec la peau

NOTRE OFFRE MEDICOM

- Safetouch Vitals
- Safetouch Soft

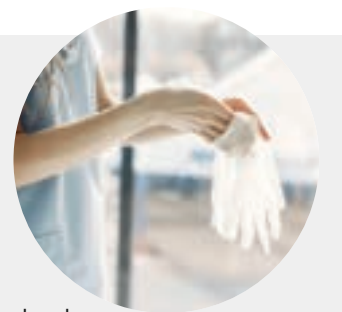

VINYLE /PE

OFFRE ÉCONOMIQUE

Coût abordable, idéal pour un usage de courte durée.

PROTECTION Niveau standard

NOTRE OFFRE MEDICOM

- Vinyle / Safetouch Everstrong
- PE



FABRIQUÉS EN FRANCE

Kolmi®
Coverfeel

**UN CONFORT
ULTIME
ET UNE
PROTECTION
SANS
COMPROMIS**




Sans accélérateur et
sans utilisation de chlore
pour limiter les risques
allergiques

Confort inégalé et
facilité d'enfilage grâce à
l'enduction polymère



Un engagement RSE fort

Protéger l'environnement
Protéger les personnes
Dynamiser l'équilibre
économique de la région

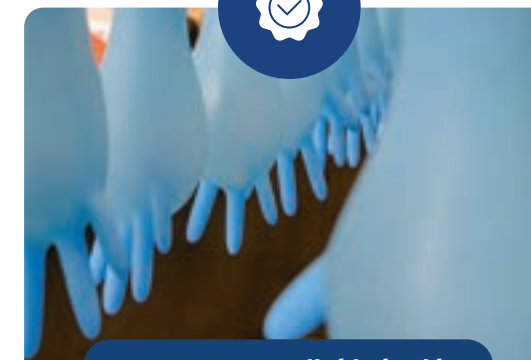

Assurance qualité inégalée

Aucun compromis sur la qualité,
le confort, la protection
et les performances



Sécurité d'approvisionnement

Une source d'approvisionnement
locale, sécurisée et fiable



Avancée technologique

Procédé innovant pour une
meilleure performance sans chlore ni
agents de vulcanisation




1140
Kolmi®
Coverfeel Touch

1142
Kolmi®
Coverfeel Care

1144
Kolmi®
Coverfeel Care Long

GANTS NITRILE

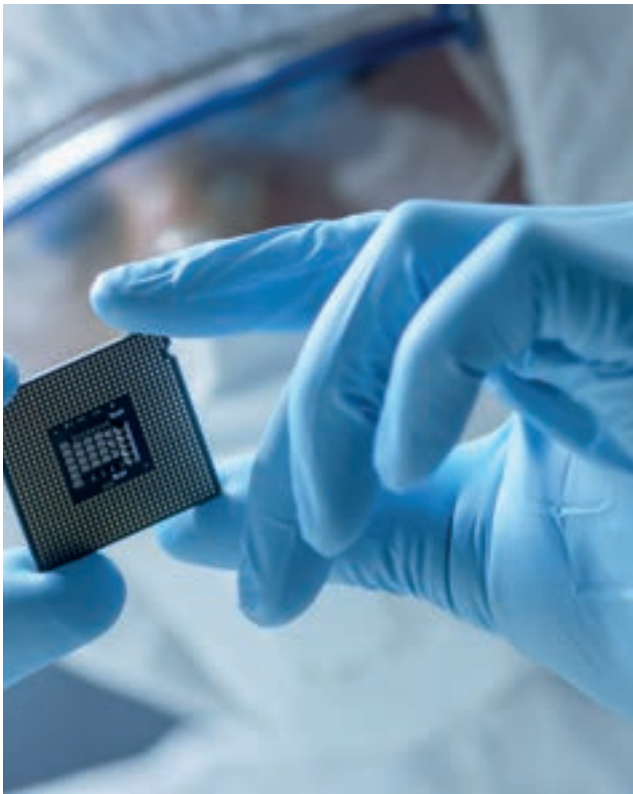

KOLMI COVERFEEL CARE

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Coverfeel Care

DM Classe I

EPI CAT III



- Grande élasticité & confort optimal.
- Excellente préhension des objets.
- Préconisé en milieu médical, industriel et agro-alimentaire.
- Fabriqué en France.

RÉF.				
1142-B	●	S	Boîte distributrice	100 u x 10
1142-C		M		
1142-D		L		
1142-E		XL		
1142-F		XXL		90 u x 10

* Toutes types de denrées

KOLMI COVERFEEL TOUCH

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Coverfeel Touch

DM Classe I

EPI CAT III



- Grande élasticité & confort optimal.
- Excellente préhension des objets.
- Préconisé en milieu médical, industriel et agro-alimentaire.
- Fabriqué en France.

RÉF.				
1140-A	●	XS	Boîte distributrice	100 u x 10
1140-B		S		
1140-C		M		
1140-D		L		
1140-E		XL		90 u x 10
1140-F		XXL		

* Toutes types de denrées

KOLMI COVERFEEL CARE LONG

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Coverfeel Care Long

DM Classe I

EPI CAT III



- Grande élasticité & confort optimal.
- Excellente préhension des objets.
- Manchette longue.
- Préconisé en milieu médical, industriel et agro-alimentaire.
- Fabriqué en France.

RÉF.				
1144-B	●	S	Boîte distributrice	100 u x 10
1144-C		M		
1144-D		L		
1144-E		XL		90 u x 10
1144-F		XXL		

* Toutes types de denrées

SAFETOUCH® SLIM



Safetouch®
Slim

DM Classe I

EPI CAT III



- Grande élasticité & confort optimal
- Excellente préhension des objets
- Préconisé en milieu médical, industriel et agro-alimentaire

RÉF.				
1175N-A	●	XS	Boîte distributrice	100 u x 10
1175N-B		S		
1175N-C		M		
1175N-D		L		
1175N-E		XL		

* Toutes types de denrées

SAFETOUCH® LONG



Safetouch®
Long

DM Classe I

EPI CAT III



- Doigts texturés pour une meilleure préhension des objets
- Manchette de 290 mm
- Préconisé en milieu médical, chimie, et laboratoires

RÉF.				
1131P-B	●	S	Boîte distributrice	100 u x 10
1131P-C		M		
1131P-D		L		
1131P-E		XL		

SAFETOUCH® PLATINUM



Safetouch®
Platinum

DM Classe I

EPI CAT III



- Grande élasticité & confort optimal
- Excellente préhension des objets
- Préconisé en milieu médical, industriel et agro-alimentaire

RÉF.				
1174N-A	●	XS	Boîte distributrice	100 u x 10
1174N-B		S		
1174N-C		M		
1174N-D		L		
1174N-E		XL		

* Toutes types de denrées

SAFETOUCH® HEAVY



Safetouch®
Heavy

DM Classe I

EPI CAT III



- Excellente solidité
- Doigts texturés pour une meilleure préhension des objets
- Préconisé en milieu médical, chimie, et laboratoires

RÉF.				
1135P-A	●	XS	Boîte distributrice	100 u x 10
1135P-B		S		
1135P-C		M		
1135P-D		L		
1135P-E		XL		

SAFETOUCH® X'TRA



- I Dextérité et confort optimal
- I Manchette longue 355 mm
- I Double chlorination
- I Préconisé en laboratoires nucléaires contre la contamination des particules radioactives

RÉF.				
30.350N/S		S	Sachet	100 u x 5
30.350N/M		M		
30.350N/L		L		
30.350N/XL		XL		

SAFETOUCH® VITALS



- I Bonne dextérité
- I Très léger
- I Emballage par 200uc
- I Recommandé en milieu médical et industriel

RÉF.				
1191N-A		XS	Boîte distributrice	200 u x 10
1191N-B		S		
1191N-C		M		
1191N-D		L		
1191N-E		XL		

* Toutes types de denrées

SAFETOUCH® VITALS



- I Bonne dextérité
- I Très léger
- I Recommandé en milieu médical et industriel

RÉF.				
1193N-A		XS	Boîte distributrice	100 u x 10
1193N-B		S		
1193N-C		M		
1193N-D		L		
1193N-E		XL		

* Toutes types de denrées

SAFETOUCH® BLACK LITE



- I Grande élasticité & confort optimal
- I Excellente préhension des objets
- I Préconisé en milieu médical, industriel, dentaire et agro-alimentaire

RÉF.				
MBKN3-6XS		XS	Boîte distributrice	100 u x 10
MBKN3-7S		S		
MBKN3-8M		M		
MBKN3-9L		L		
MBKN3-10XL		XL		

* Toutes types de denrées

HERKUL GRIP EXTRA STRONG



- I Surface texturée 3D unique pour une dextérité maximale
- I Bonne adhérence sur surface huileuse
- I Gant très épais pour une plus grande durabilité

RÉF.				
HORNG8N-8M		M	Boîte distributrice	100 u x 10
HORNG8N-9L		L		
HORNG8N-10XL		XL		
HORNG8N-11XXL		XXL		

HERKUL GRIP STRONG



- I Surface texturée 3D unique pour une dextérité maximale
- I Bonne adhérence sur surface huileuse
- I Gant très épais pour une plus grande durabilité

RÉF.				
HBKNG6N-8M		M	Boîte distributrice	100 u x 10
HBKNG6N-9L		L		
HBKNG6N-10XL		XL		
HBKNG6N-11XXL		XXL		



GANTS LATEX

SAFETOUCH® SOFT



Safetouch®
Soft

DM Classe I

EPI CAT III



- Grande élasticité et dextérité
- Enfilage facile grâce à son revêtement polymère interne
- Recommandé en milieu médical et industriel

RÉF.				
1130-A		XS	Boîte distributrice	100 u x 10
1130-B		S		
1130-C		M		
1130-D		L		
1130-E		XL		

SAFETOUCH® VITALS



Safetouch®
Vitals

DM Classe I

EPI CAT III



- Grande élasticité et très bonne dextérité
- Recommandé en milieu médical et industriel
- Poudré

RÉF.				
1121-A		XS	Boîte distributrice	100 u x 10
1121-B		S		
1121-C		M		
1121-D		L		
1121-E		XL		



GAMME
SOFT & VITALS

Nos gants proviennent de plantations d'hévéas gérées de manière appropriée et durable selon des principes internationalement reconnus. Ils sont également 100% produits en utilisant l'énergie renouvelable de la biomasse (bois) pour réduire l'empreinte carbone.

SAFETOUCH® VITALS



Safetouch®
Vitals

DM Classe I

EPI CAT III



- Grande élasticité et très bonne dextérité
- Recommandé en milieu médical et industriel

RÉF.				
1122-A		XS	Boîte distributrice	100 u x 10
1122-B		S		
1122-C		M		
1122-D		L		
1122-E		XL		

* Restrictions denrées acides

GANTS VINYLE

SAFETOUCH® EVERSTRONG



Safetouch®
Everstrong

DM Classe I

EPI CAT III



- Bonne élasticité
- Confort optimal
- Préconisé en milieu médical, industriel et agro-alimentaire

RÉF.				
MCLV5-7S		S	Boîte distributrice	100 u x 10
MCLV5-8M		M		
MCLV5-9L		L		
MCLV5-10XL		XL		

* Restrictions denrées grasses

SAFETOUCH® EVERSTRONG



Safetouch®
Everstrong

EPI CAT III



- Bonne élasticité
- Confort optimal
- Préconisé en milieu industriel et agro-alimentaire
- Poudré

RÉF.				
MCLVP4-7S		S	Boîte distributrice	100 u x 10
MCLVP4-8M		M		
MCLVP4-9L		L		
MCLVP4-10XL		XL		

* Restrictions denrées grasses

GANTS PE

GANT PE 270MM



- Matière polyéthylène pour une bonne dextérité
- Usage très-court (stations-services...)
- Ambidextre
- Non poudré

RÉF.				
30.301/M		M	Boîte distributrice	100 u x 50
30.301/L		L		

GANT PE 920MM



- Grande longueur – 920 mm
- Ambidextre
- Préconisé dans le secteur vétérinaire, agro-alimentaire (opérations de mélange)

RÉF.				
30.505		Taille unique	Sachet	100 u x 20

CATALOGUE



MEDICOM SAS

+33 (0)241 963 434

Boulevard de la Chanterie
49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou
FRANCE

sales.support.pro.eu@medicom.com

www.medicom-eu.com



MEDICOM GMBH

+49-2171-706670

Benzstraße 1c
Leverkusen 51381
GERMANY

ТОВ «МЕДІКОМ-УКРАЇНА»

+38 (0)44 303 99 43

03115, Україна, м. Київ,
вул. Серпова, 11
УКРАЇНА



Le Réseau Coci
courrier@lereseaucocci.fr
03 89 72 05 35